



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MASAŻER NARAMIENNY PRO-Comfy25W Wireless

Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem!

Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, oparzeń, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń, należy przestrzegać poniższych instrukcji.

- Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Aby uniknąć przegrzania produktu, nie należy go używać pod poduszkami, kocami itp.
- Proszę trzymać z dala od dzieci.
- Proszę trzymać z dala od wody i płynów.
- Użytkownicy z upośledzeniem fizycznym lub niepełnosprawnością powinni używać pod kierunkiem i po przeczytaniu instrukcji.
- Proszę używać tego produktu zgodnie z dostarczoną instrukcją.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Po użyciu lub przed czyszczeniem produktu, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Jeśli produkt wpadnie do wody, nie dotykaj mokrego produktu. Musisz wyciągnąć wtyczkę.
- Nie używaj produktu podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie.
- Nie umieszczaj produktu w wodzie ani innym płynie.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli cierpisz na następujące schorzenie lub stan, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem: niewydolność serca, niewydolność nerek, zakażenie żył powierzchownych (tzw. zapalenie żył) lub tkanki miękkiej (tzw. Zaburzenia krwawienia.)

Osoby nieodpowiednie do korzystania z tego produktu. Jeśli masz następujący stan, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

- Chory, który otrzymuje lekarstwa od lekarza lub źle się czuje.
- Pacjent z chorobą nowotworową.
- Kobieta w ciąży lub kobieta w menstruacji
- Nie używać przez osoby z implantami medycznymi bez konsultacji z lekarzem.
- Nie używać na uszkodzonej skórze lub w przypadku bólu niewyjaśnionego pochodzenia.

SPOSÓB UŻYCIA

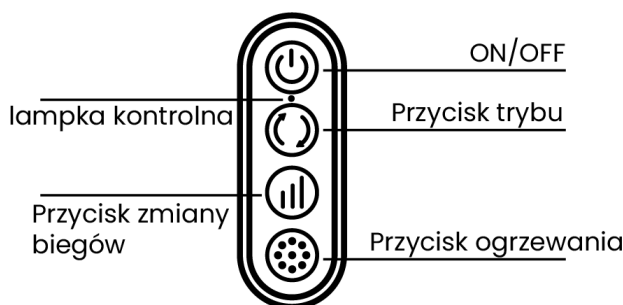

Włącz zasilanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby rozpocząć działanie produktu.

Regulacja biegów.

- Po włączeniu produktu domyślnym stanem jest drugi bieg. Naciśnij przycisk koła zębatego, aby przejść do trzeciego biegu.
- Naciśnij ponownie przycisk zmiany biegów, aby przejść do pierwszego cyklu zmiany biegów.

Wybór trybu

- Po włączeniu zasilania domyślnie ustawiony jest tryb 1. Aby przełączać się między trybem 1 i trybem 2, należy lekko nacisnąć przycisk trybu.

Regulacja ciepłego kompresu

- Po włączeniu zasilania funkcja gorącego kompresu jest domyślnie wyłączona.

- Naciśnij przycisk skrótu, aby przejść do pozycji dolnej.
- Naciśnij ponownie przycisk skrótu, aby przejść do wyższej pozycji.

Wyłączenie systemu

- Automatyczne wyłączenie: Automatyczne wyłączenie po 15 minutach używania produktu. Ręczne wyłączenie: Aby wyłączyć, lekko naciśnij przycisk.

Środkową podszewkę można zdemontować i wyprać.

Za pomocą wilgotnej ściereczki lub gąbki nasącz odpowiednią ilość

odpowiednią ilość ciepłej wody do powłoki PU i delikatnie przetrzyj powierzchnię skórzanej powłoki, aby usunąć kurz i brud.

METODA ŁADOWANIA

Kwestie wymagające uwagi

- Produkt nie jest wyposażony w adapter.
- Tego produktu nie można ładować za pomocą szybkiego ładowania.
- Do ładowania tego produktu należy używać zasilacza wyjściowego 5V1A.

Metoda ładowania

- Ten produkt wykorzystuje interfejs typu C.
- Podłącz maszynę do źródła zasilania 5V1A za pomocą dołączonego kabla ładującego, aby ją naładować.
- Podczas ładowania kontrolka świeci na czerwono. Po pełnym naładowaniu kontrolka świeci na zielono.
- Po naładowaniu ostrożnie odłącz ładowarkę.

DANE TECHNICZNE

Moc:	25 W
Napięcie:	5V
Materiał:	Miękka skóra ekologiczna
Bezprzewodowe użytkowanie:	Bateria 1800mA
Bogaty wybór prędkości i trybów:	Tak
Rozszerzona 6D głowica masująca:	Tak
Masaż mięśnia czworobocznego szyjnego:	Tak
Elastyczna głowica masująca:	Tak
Relaksujące ciepło:	Tak
W zestawie:	Zasilacz

WSZYSTKIE ZDJĘCIA I RYSUNKI MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY.

Utylizacja sprzętu elektrycznego



Symbol przekreślonego kontenera na odpady na kółkach umieszczony na produktach informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (dalej również „zużyty sprzęt” lub „elektrośmieci”) nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do pojemnika stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon) niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Sortując i przekazując zużyty sprzęt do przetworzenia, odzysku, recyklingu i utylizacji, chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Malis B. Machoński Sp. K. oświadcza, że opisane w niniejszej instrukcji Urządzenie Maltec spełnia wszystkie wymagania:

DYREKTYWY:

(EMC) Directive 2014/30/EU
(LVD) Directive 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863 + (EU) 2017/2102

Normy:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

IEC 62321-4:2013+AMD11:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Producent:

Malis B. Machoński Sp. K.

Zbożowa 2E, Wysogotowo

62-081, Przeźmierowo, Polska

www.malis.pl

Bartosz Machoński